

Spécifications techniques

PIÈCE À MAIN	TECHNOLOGIE	TEMPS (sec)	TAILLE du spot (cm²)	RÉPÉTITION DE PULSE (Hz)	INTENSITÉ (J/cm²)
Élimination des poils	In-motion AFT	1 - 3 - 30	5	3	1 - 7
Photo-réjuvénation*	In-motion AFT	1 - 3 - 12	3	2	1 - 12
Refroidissement	Système de contact intégré				
Alimentation	220 - 240 VAC, 6A, 50/60 Hz				
Dimensions	550 x 570 x 930 mm				
Poids	70 kg				

* en option

Formation qualifiante

Une formation qualifiante pour le praticien et ses assistantes dispensée par un organisme de formation **enregistré par l'état**. Cette formation est validée par un **certificat reconnu par le public et les compagnies d'assurances**.



Pack marketing
(affiches et dépliants Grand Public)

LE MEILLEUR DISPOSITIF *DE L.P.I.*
AVEC TECHNOLOGIE "IN MOTION" !

LA *DOULEUR*
en MOINS...

...LE *PLAISIR*
en PLUS ▶



Une longue expertise et un véritable savoir-faire à destination des professionnels de santé. Une large gamme de produits à la pointe de la technologie.



WISHPRO
www.wishpro-france.com



TWIN SLIM
www.twin-slim.com



MKS
Cryolipolyse
nouvelle génération



WISHPRO LED
www.wishpro-france.com





Le principe

Le principe de la **Lumière Pulsée Intense** consiste à utiliser un rayon lumineux dont l'intensité, la durée et la longueur d'onde sont parfaitement maîtrisées. Transformé en chaleur et absorbé par les pigments (chromophores : mélanine, hémoglobine, eau), ce rayonnement va produire des effets en profondeur dans les tissus ciblés (poils ou fibroblastes), **sans endommager les tissus environnants ni délivrer un pic d'énergie inconfortable**. Ce principe peut être décrit comme la **photo-thermolyse sélective**.

La vie d'un poil se décrit en trois étapes :

La phase de croissance durant entre un et trois mois est appelée **anagène**, puis vient une courte phase de régression que l'on nomme **catagène** et pour finir vient la phase de repos précédant la chute du poil : **télogène**.



La technologie "In Motion"

L'ÉPILACTION® est un dispositif de **Lumière Pulsée Intense de dernière génération**, permettant de traiter :


- l'élimination des poils,
- la régénération cutanée,

Ce dispositif utilise la **technologie brevetée "In Motion"**, **réelle innovation** par rapport aux technologies traditionnelles, d'une **efficacité totale et d'une sécurité absolue**.

L'ÉPILACTION® est unique car son procédé de **flash continu travaille en mouvement**, avec une technique innovante dite de "balayage" qui élimine le problème fréquent des zones sautées ou manquées. Cette couverture complète se traduit par **une peau débarrassée de ses poils, sans souffrance**.




La clé est dans l'échauffement progressif et contrôlé... Un fort taux de répétition de pulses associé à une puissance moyenne élevée, fait de L'ÉPILACTION® **un véritable fleuron de l'industrie mondiale**. Il chauffe progressivement le follicule pileux - sans inconfort - en maintenant une efficacité maximum, sans risque de brûlure ou de lésion. Cette approche, associée au **système de refroidissement de contact intégré**, permet de **traiter sans douleur tous types de peaux** (y compris les peaux noires) et **tous types de poils** (y compris les poils clairs).

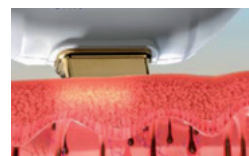

Avant



Pendant

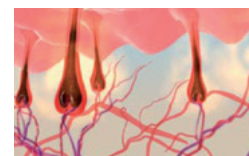

Après

La supériorité de L'ÉPILACTION®

Une étude scientifique a été publiée sur l'**efficacité comparée** de ce dispositif avec les technologies les plus connues : les résultats obtenus sont comparables, mais sans douleur et pour un coût amplement inférieur.

L'ÉPILACTION® offre la possibilité de travailler **à une vitesse sans égale**, ce qui permet à l'utilisatrice de traiter plus de zones en un temps donné.

Pour la première fois, on peut parler d'un **traitement indolore**, ce qui constitue une révolution dans le monde de **l'élimination des poils**.

ÉPILACTION®



Flasher en continu avec la technologie "In Motion" jusqu'à 30 secondes (gain de temps exceptionnel pour le traitement des grandes zones : dos, jambes).



Pouvoir **pratiquer en toutes saisons** sur hommes et femmes.



Avoir une **efficacité sur tous les types de peaux** sans effet secondaire.



Pièce à main pouvant assurer jusqu'à 1 000 000 de tirs (fini la lampe à changer tous les 40 000 tirs !).




Système de **refroidissement de contact intégré** permettant de **pallier aux sensations de douleur**.

RÉSULTATS



AVANT

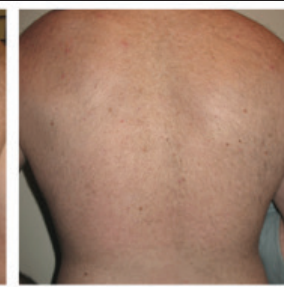

APRÈS 2 Séances



AVANT



APRÈS 5 Séances